

## GASTROVIDEOSCÓPIO EVIS EXERA III OLYMPUS GIF-1TH190

### Instruções


As seções abaixo fornecem informações atualizadas sobre o procedimento de secagem durante a etapa de enxágue do Capítulo “5.7 Enxágue do endoscópio e dos acessórios após a desinfecção”. Especificamente, as etapas abaixo substituem ou adicionam a seção “■ Secar o endoscópio” do Capítulo 5.7 (após a seção “■ Lavagem com álcool”). As outras partes do manual de instruções não foram alteradas.

### ■ Secar o endoscópio


#### AVISO

Ao arejar os canais do endoscópio, a pressão do ar não deve ultrapassar 0,5 MPa (5 kgf/cm<sup>2</sup>, 71 psig). Pressões mais elevadas podem danificar o endoscópio.


1. Cubra a extremidade distal, a seção de controle e o conector do endoscópio com panos que não soltem fiapos esterilizados para evitar que respingue álcool ou água das aberturas dos canais.

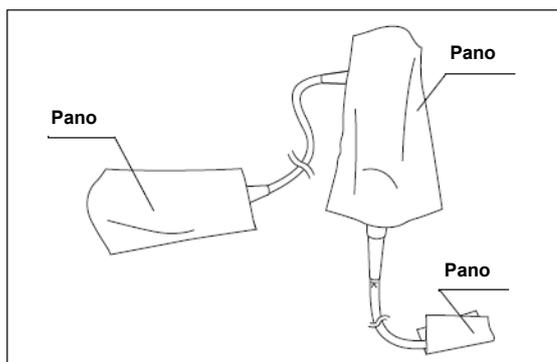


2. Forneça ar comprimido filtrado a uma pressão de 0,2–0,5 MPa na abertura do cilindro de aspiração até que não saia mais álcool nem água da extremidade distal, da porta do canal do instrumento, ou do conector de aspiração. Forneça ar comprimido por no mínimo 3 minutos para álcool e por no mínimo 90 segundos para água.

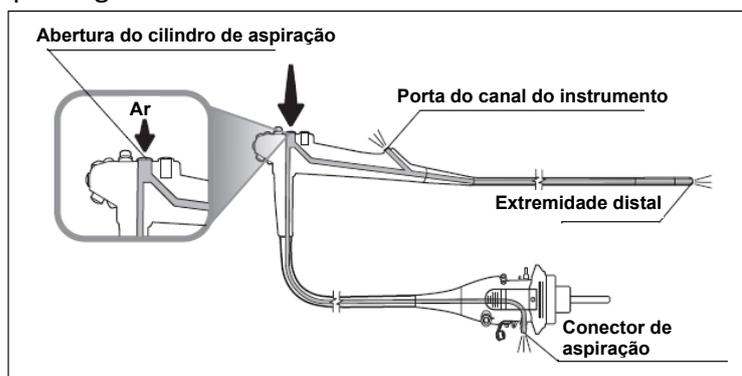


3. Forneça ar comprimido filtrado a uma pressão de 0,2–0,5 MPa na abertura do cilindro de ar/água até que não saia mais álcool nem água da extremidade distal, do conector do fornecimento de ar, do conector do fornecimento de água e da cânula de ar do endoscópio. Forneça ar comprimido por no mínimo 3 minutos para álcool e por no mínimo 90 segundos para água.

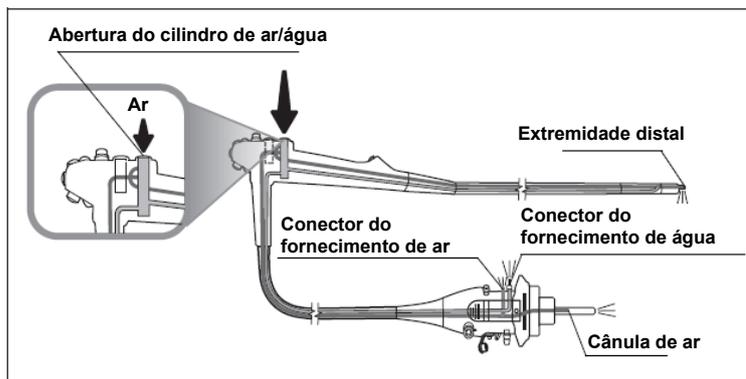


4. Forneça ar comprimido filtrado a uma pressão de 0,2–0,5 MPa na entrada auxiliar de água até que não saia mais álcool nem água da extremidade distal do endoscópio. Forneça ar comprimido por no mínimo 3 minutos para álcool e por no mínimo 90 segundos para água.

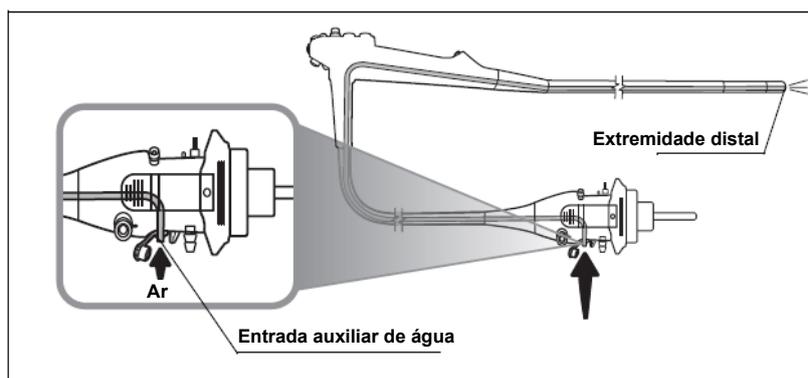


5. Forneça ar comprimido filtrado a uma pressão de 0,2–0,5 MPa na porta do canal do instrumento até que não saia mais álcool nem água da extremidade distal do endoscópio. Forneça ar comprimido por no mínimo 3 minutos para álcool e por no mínimo 90 segundos para água.

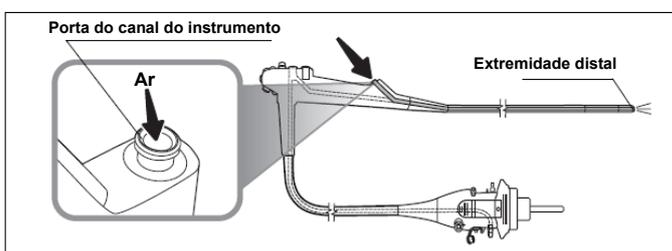

6. Seque cuidadosamente o interior do cilindro de aspiração, o cilindro de ar/água e a porta do canal do instrumento do endoscópio usando cotonetes de algodão estéreis.

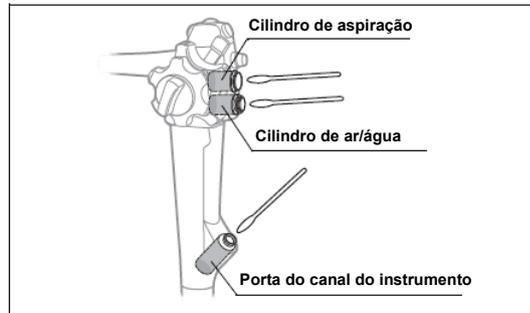

7. Seque cuidadosamente as superfícies externas do endoscópio com panos que não soltem fiapos esterilizados.

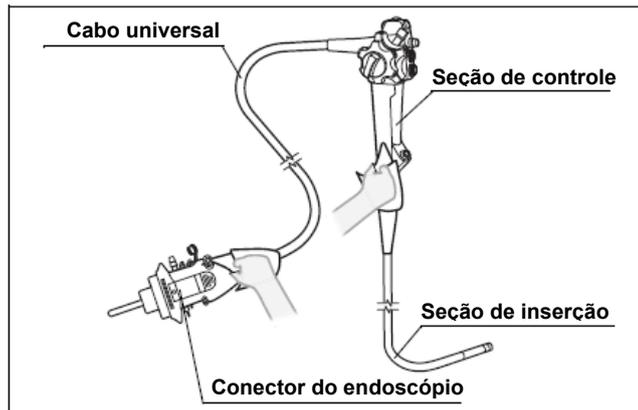

Fim.