

Curitiba, 05 de janeiro de 2017.

COMUNICADO IMPORTANTE

Prezado cliente,

Segue abaixo importante notificação. Pedimos a gentileza de seguir todas as orientações descritas:

Produto: Complemento de Coelho Liofilizado Classe I - CAB-1D

Rastreabilidade: Lot 031, Batch 0000100559.

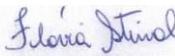
Notificação: O Complemento de Coelho do lote/batch mencionado acima pode estar descolorado e não estar funcionando corretamente. O produto pode não estar ativo e não causar a morte dos linfócitos e como resultado não haverá reações positivas. É possível identificar o problema a partir do desempenho do Controle Positivo que na reação será negativo.

Risco para saúde: Não há risco para o paciente ou usuário final porque não serão obtidos resultados.

Ações a serem tomadas: Rever os resultados gerados com o produto acima. Resultados de testes impactados por este lote/batch devem ser analisados pelo responsável do Laboratório. Outras análises podem ser necessárias para confirmar o resultado dos testes. Os frascos fechados devem ser descartados e serão repostos pelo fornecedor.

Sem mais para o momento e disponível para esclarecimentos,

Atenciosamente,


Flávia Stival
Biometrix Diagnóstica Ltda
Resp. Técnico
CRF 26565 - PR

